


家庭用RF美容器 S0214

取扱説明書

・本体



・表示部

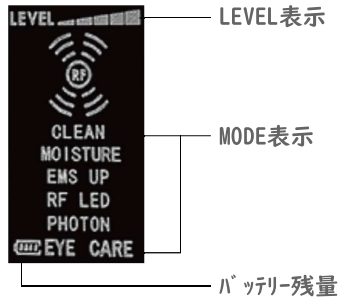

・使用方法

1. まずは洗顔して、お顔で保湿効果の高いスキンケア製品を塗る。
2. 電源ボタン(POWER/MODE)を押して、製品を起動する。
3. 自分のニーズにより、MODEを選んでください。
LEVELボタンでレベルを調整してください。
4. 電源ボタン(POWER)を2秒続けて押すと、シャットダウンする。
5. 上側の液晶スクリーンから、製品の作動状態を見える。

・使用範囲

1. 目の周り、目の下、頬、額、口のまわりなどの顔全体（まぶたを除く）のフェイストリートメントだけでなく、肩やネックトリートメント（喉仏を除く）も行えます。
2. 目の周りのお手入れをする場合は目を閉じて軽く当てるように使用してください。

・仕様

RF周波数：1MHz
 最大効率：8W
 使用時間：40分
 入力電圧：DC 5V USB端子より給電
 充電時間：3時間
 バッテリー容量：1000mAh
 サイズ：165mm×55mm×48mm（最大）
 本体重量：150g
 本体色：黒/ピンク
 使用温度：20-40℃（室内使用）
 その他機能：オートオフ機能あり
 付属品：本体、目元ケアヘッド、USBケーブル、収納袋

01 MODE1

RF+クレンジング
LEVEL 1~5

- ・振動を同時に行いイオン導出
- ・使用時間：3min/回
- ・使用頻度：2~3回/週

02 MODE2

RF+モイスター
LEVEL 1~5

- ・美容成分を肌の奥までしっかり浸透
- ・使用時間：3min/回
- ・使用頻度：2~3回/週

03 MODE3

RF+EMS UP
LEVEL 1~5

- ・筋肉運動が起り、ほうれい線などのたるんだ部分を引き締め
- ・使用時間：3min/回
- ・使用頻度：2~3回/週

04 MODE4

RF+LED
LEVEL 1~5

- ・コラーゲンの成長を促し、お肌がかもちり
- ・使用時間：3min/回
- ・使用頻度：2~3回/週

05 MODE5


RF+フオン
赤/青

- ・赤LED波長650nm（±10nm）
血行や新陳代謝を促進効果
- ・青LED波長450nm（±10nm）
きにくい肌質への改善
- ・使用時間：3min/回
- ・使用頻度：2~3回/週

06 MODE6

RF+目元ケア
LEVEL 1~5

- ・専用ヘッドで目元をケア
- ・使用時間：3min/回
- ・使用頻度：2~3回/週

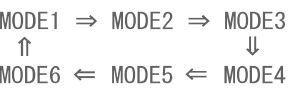

保証書

型番	S0214		
お客様	お名前・ご住所 〒		
	TEL		
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

販売元

アリス株式会社
 〒541-0046
 大阪府大阪市中央区平野町1-6-5大山ビル
 TEL/FAX：06-6202-7783

ご意見、要望などがございましたら
 info@arisjapan.comにお問合せください。

Made in China